

STARFORMER®

Estimulación Magnética Funcional · FMS
Remodelación corporal y fortalecimiento muscular



STARFORMER®

StarFormer® es la última innovación de Fotona en modelado corporal. Esta innovadora tecnología utiliza energía de pulso magnético para estimular la contracción muscular. Como resultado, los músculos se fortalecen, tonifican y reafirman.


El sistema ofrece dos opciones de tratamiento:

- **TightWave®**
fortalecimiento muscular, tonificación y reafirmación de áreas debilitadas
- **IntimaWave®**
Fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

¿En que consiste?

StarFormer® utiliza la tecnología de estimulación magnética funcional · FMS para tratar selectivamente los tejidos musculares.

Los pulsos magnéticos penetran de forma inocua en las capas de los músculos haciendo que se contraigan automáticamente. El resultado final es un aumento de la masa muscular.

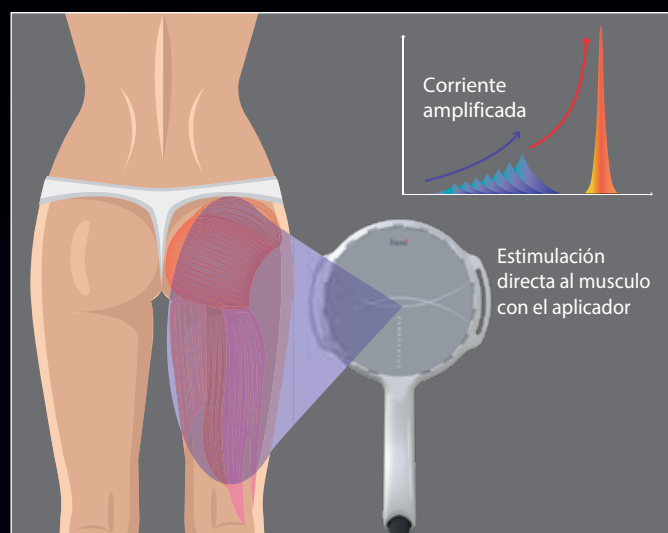

TIGHTWAVE®

TightWave® es un tratamiento innovador para fortalecer, tonificar y reafirmar de manera efectiva diferentes áreas del cuerpo:



- **Glúteos**
- **Abdomen**
- **Zona isquiotibiales**
- **Brazos**
- **Musculatura de la espalda**



El tratamiento se realiza con el paciente acostado completamente vestido.

Una sesión generalmente dura entre 20 y 30 minutos y los pacientes reanudan sus actividades diarias inmediatamente después del tratamiento.

INTIMAWAVE®

StarFormer® también se puede usar para estimular los músculos del suelo pélvico y la zona lumbar, disponible con dos solenoides para tratar todo tipo de incontinencia fecal y urinaria masculina o femenina. Durante el tratamiento, el paciente permanece completamente vestido y se sienta en el cómodo sillón IntimaWave®. Los aplicadores magnéticos de la silla estimulan la contracción muscular en toda la zona del suelo pélvico, aumentando su fuerza y resistencia. Como resultado proporciona un alivio eficaz, y a medio plazo la eliminación del flujo de orina descontrolado.



antes



Los músculos del suelo pélvico no soportan suficientemente los órganos pélvicos que afectan el control de la vejiga.

después




La estimulación magnética induce el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico y el retorno de la función de continencia normal.



Un dispositivo, múltiples soluciones

Ventajas clave:

- Fortalecimiento muscular seguro, rápido y fácil de usar.
- No invasivo,
- Mejora después de solo unas pocas sesiones.
- Procedimiento ambulatorio,
- Alto índice de éxito y satisfacción del paciente,

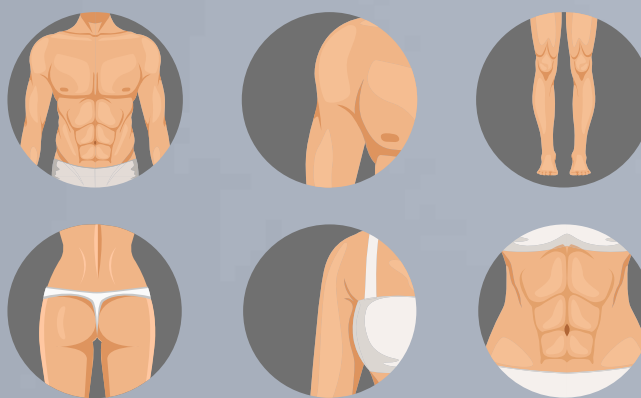

Nombre equipo:	Fotona StarFormer®
Voltaje:	100-240V AC, 50~60Hz
Potencia:	1500 VA
Protección IP:	IPX0
Tamaño (W x L x H):	421 mm x 630 mm x 843 mm
Peso:	50 kg
Clasificación EC 60601/1:	Class I, Type BF
Clasificación MDD 93/42/EEC:	Class IIa

CE 2265

Todos los dispositivos médicos Fotona tienen la marca CE y están aprobados para su venta en la UE. Para los países donde se requieren aprobaciones o autorizaciones nacionales específicas, es posible que algunos de los productos y / o aplicaciones aún no hayan sido aprobados. Consulte con Fotona, su distribuidor Fotona local o su organismo regulador nacional sobre si se ha aprobado la comercialización y venta de un producto o aplicación específicos en su país

Para patentes relacionadas, consulte: www.fotona.com/patents

 **quomedica**
Fotona España
choose perfection

Calle Catedrático Fernando Senent Pérez, 11 Bajo 46026

· Valencia · (España) - info@quomedica.com

www.quomedica.com

Fotona, d. o. o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia
EU